


Athenaで19-SSD蛍光XAFSデータを読み込む方法


How to import 19-SSD fluorescence XAFS data in Athena

② "select range"をクリック
Click on "Select range"

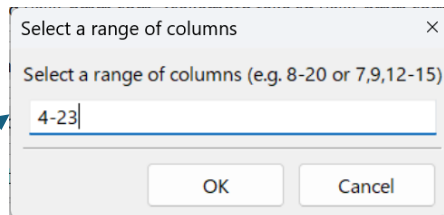


③ 4-23と入力してOKをクリック。
Type "4-23" and click "OK".

i0~23のNumeratorにチェックが入る。
The "numerator" rows in columns i0-23 will be checked.

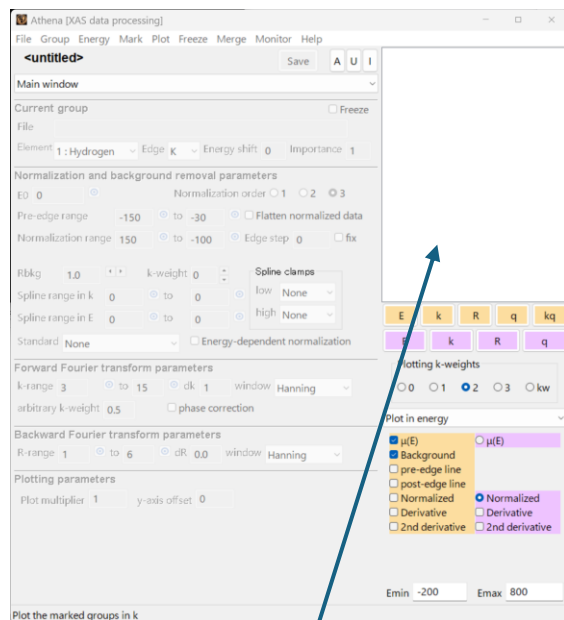

① データファイルをここにdrag&dropする。
Drug&drop the data file.

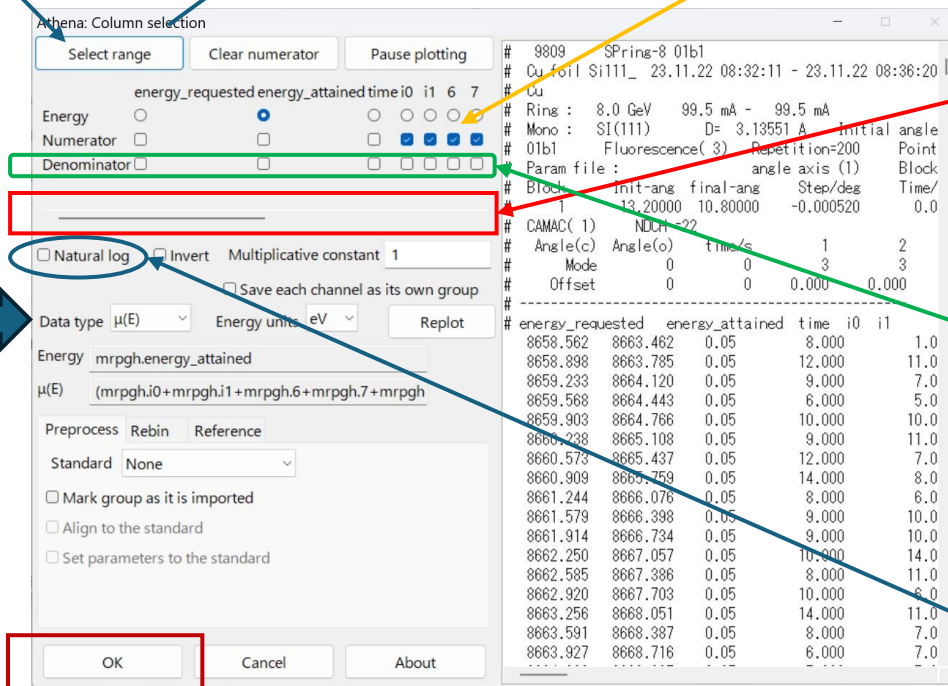

④ スライダーを一番右側までスライドさせる。
Slide the slide bar to the far right.

⑤ 「23」列の右隣り (= 「24」列) のDenominatorのチェックボックスにチェックを入れる。
Check the "Denominator" row in column "24" to the right of column "23".

⑥ "Natural log" のチェックを外す。
Uncheck the "Natural log".

⑦ "OK" をクリック。
Click "OK"