
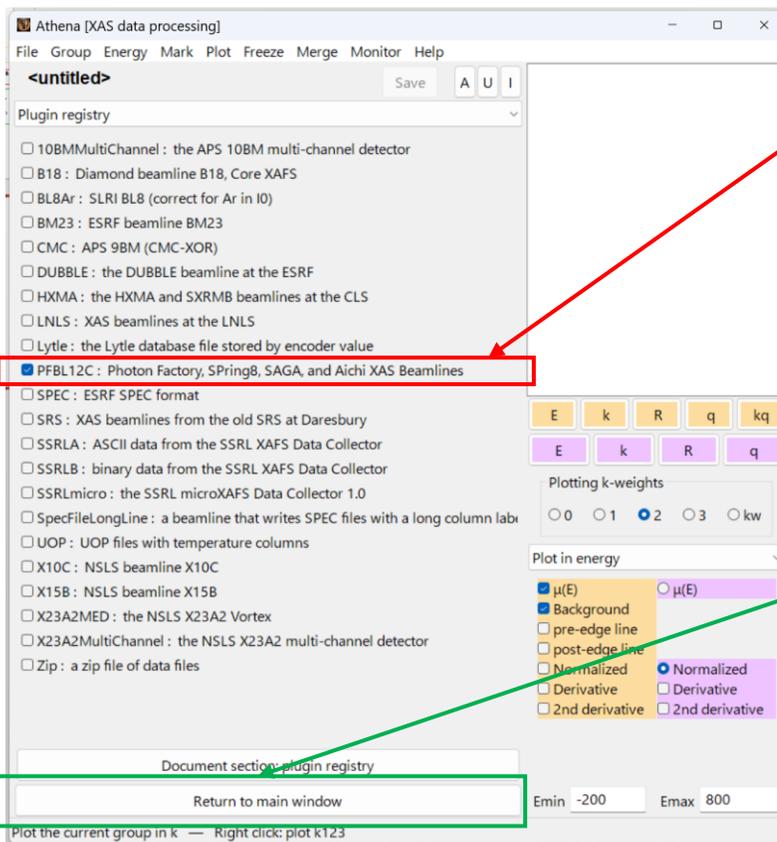


AthenaでSPring-8 データ形式 (9809) を読み込むための設定

How to import SPring-8 XAFS data format (9809) in Athena

(1) Athenaを起動する。
Launch Athena.

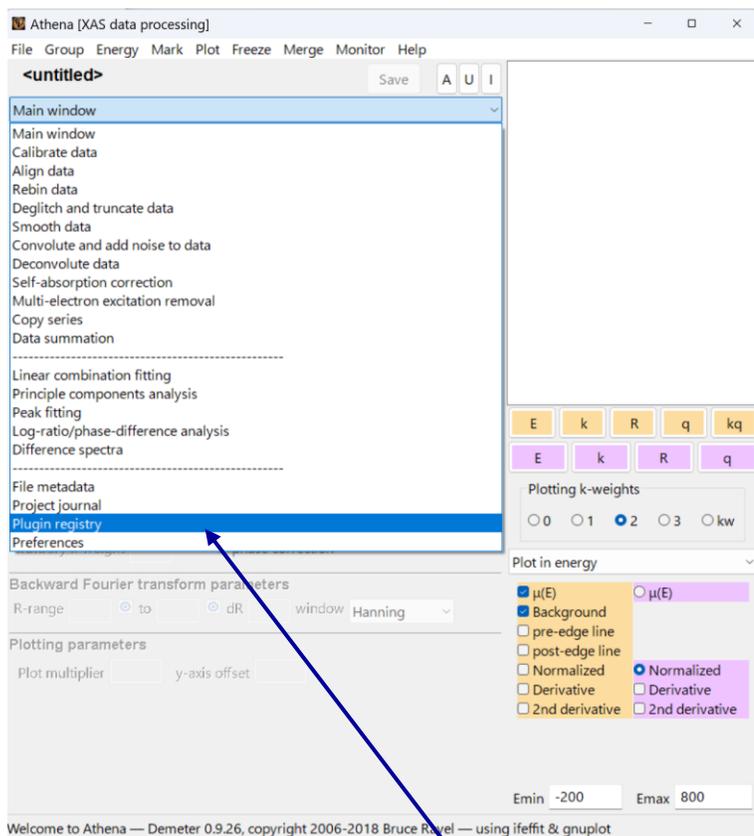

(3) プラグインのリストが表示されるので、“PFBL12C” にチェックを入れる。
From the list of plug-ins on the left side of the main window, check the checkbox next to "PFBL12C".

(4) “Return to main window” をクリック。
Click "Return to main window" at the bottom left.

(2) Athenaの左上の”Main Window”を左クリックして、“Plugin registry”を選択する。
Left-click where it says “Main Window” in the upper left corner of the Athena main window and click "Plugin registry".